

Kørestole

Stole



Den ultimative
positionerings-
løsning





Make Rehabs mission og vision med Kelvin kørestolene

Som hovedforhandler vil vi sætte fokus på, hvordan 24 timers positionering kan skabe energibalance hos selv de mest svækkede mennesker.

Energibalance – livskvalitet i alle livets faser

Vores fokus vil være at skabe og understøtte den enkeltes livskvalitet i alle livets faser. Dette ved at sikre, at de basale behov bliver tilgodeset bedst muligt, hvorved der frigives energi til andre aktiviteter. Med samtlige stole inkl. Bendix ryggen skaber vi rig mulighed for at imødekomme dette i både primær og sekundær sektor.

Vi vil gerne udvikle sammen med jer

Vi er altid på udkig efter endnu bedre positioneringsløsninger, og vi er i konstant videreudvikling af vores produkter. Dette kræver opdateret viden, effektmåling og evaluering af vores løsninger i praksis. Så lad os i fællesskab med jer udvikle og skabe de bedste velfærdsteknologiske løsninger for svækkede mennesker og det personale, som skal betjene disse. Sammen med os har I mulighed for at deltage i mindre eller større projekter afhængig af jeres ønsker og behov.

Vores mål i Make Rehab er, at vi sammen løfter vidensniveauet indenfor hjælpemiddelsområdet, hvilket vores erfaringer viser sker bedst ved at udvikle sammen med praksis og diverse studie- og forskningsmiljøer.

Vi vil som altid stille vores faglige kompetencer og kliniske erfaringer til rådighed i forhold til at deltage i afprøvninger, tilpasninger og justering af Kelvin stolene. Ligeledes efter behov bidrager vi gerne med vurdering og sparring af hvilken type af kelvinstolene, der er bedst egnet til det pågældende menneske og patientgruppe.



Kelvin Komfort kørestol

Den ultimative positioneringsløsning

Kelvin Komfort kørestolen er en modulopbygget *tilt in space* kørestol, hvilket giver rig mulighed for at justere og tilpasse stolen. Kørestolens 45° tilt funktion sikrer, at personer med stærk reduceret trunkus stabilitet og deraf nedsat siddende balance får mulighed for at opnå en siddende stilling - ude af sengen. Ligeledes bliver forflytning ind og ud af stolen nemmere, hvilket tilgodeser personalets fysiske arbejdsmiljø.

Individuelt justérbare pudemoduler afhængigt af behovet for trykaflastning

Kørestolen er opbygget af pudemoduler, og modulernes fyldning er en kombination af krøyerkugler og latex skum. Mængden af fyld i hvert modul justeres med udgangspunkt i den enkeltes behov. Derved er det muligt at opbygge stolens moduler, så mennesker med kyfose og eller skoliose får præcis stabil støtte med optimal trykfordeling.

Er der behov for endnu mere trykaflastning kan fyldet udskiftes med NGP kugler. Herved understøttes og vedligeholdes den enkeltes siddestilling bedst muligt, og den enkeltes mulighed for at opretholde eller genvinde et meningsfyldt og aktivt liv øges.

Forskellige positioneringsbælter til forskellige funktionsniveau

Kelvin Komfort kørestolen leveres nu med en ny fleksibel løsning til montering af forskellige positioneringsbælter; herved sikres et korrekt træk i positioneringsbæltet. Stolens store fleksibilitet gør det nemt at tilpasse og justere stolen i takt med, at den enkeltes funktionsniveau ændres.

Desuden har kørestolen et rigt tilbehørsprogram, hvor man kan vælge mellem tre forskellige sædeløsninger, tre typer nakkestøtter, to typer betræk, flexarme med og uden tyngde, bord, sidestøtter afhængigt af kropsform, armlæn osv. Herved sikres, at personen får fuldt udbytte af stolens funktioner.

Stor genanvendelighed samt mulighed for gentilpasninger og eftermonteringer

Kelvin Komfort kørestolen har med sin fleksibilitet og rige udvalg af tilbehør en stor genanvendelighed. Make Rehab tilbyder vores kompetencer og service i forbindelse med udførelse af gentilpasning af nye og tidligere indkøbte kørestole. For at tilgodese arbejdsmiljøet, er det desuden muligt at eftermontere både el-tilt og hjælperstyret motor på kørestolen. Begge dele skal udføres af Make Rehabs tekniske personale.

Energibalance og øget livskvalitet

Kelvin Komfort kørestolens komfort og unikke tilpasningssystem bidrager med at skabe et afgrænset og trygt miljø for den svækkede person med lavt funkti-



onsniveau. Herved skabes energibalance, hvor personen kan frigøre ressourcer og overskud til eksempelvis at øge eller vedligeholde deltagelse i sociale aktiviteter samt have overskud til at deltage aktivt i spisesituationen. Således kan personen opretholde et meningsfyldt liv, hvilket giver livskvalitet.

Hvem vil have gavn af en Kelvin Komfort kørestol?

Mennesker som ikke er i stand til at sidde i en almindelig komfortstol. Personer som opholder sig primært i sengen og ikke selvstændigt kan foretage stillingskift. Personer i terminale forløb. Mennesker med smerter, med deformiteter, med risiko for tryksår, med motorisk uro, med respiratoriske udfordringer, med ufrivillige bevægelser, med SI-vanskeligheder og i forbindelse med tidlig mobilisering efter en apopleksi.

I forhold til diagnoser anvendes Kelvin kørestolen ofte til mennesker med demens i de sene stadier, mennesker med Parkinson, mennesker med ALS, mennesker med sklerose, mennesker med Huntington's disease og mennesker med forskellige typer pareser såsom hemiplegi.



Specifikationer


Produktspecifikationer	
Max vægtpacitet	125 kg
Vægt	Ca. 47 kg
Sædetilt bagud	0 - 45°
Nakkestøtte	Ja, flere typer
Fodstøtter	Ja, flere typer
Hjælpe motor kan eftermonteres	Ja
El-tilt kan tilkøbes eller eftermonteres	Kontakt Make Rehab for service og pris
Indstillelige skubbehåndtag	Ja
Indstillelig i hofte-, knæ, og ankelled	Ja
Åndbart- og vaskbart betræk	Ja
Stel	Lakeret aluminium
Hjul	Massive
Pudeoverflade	PU
Pudefyld	Latex med krøyerkugler. Alternativt NGP kugler.

Model – mål i cm	Sædebredde	Sæde dybde	Sæde højde	Total bredde	Total længde	Ryg læns højde	Varenr	HMI nr.
Kelvin Komfort kørestol S 40	34-40	40	55	60	130	55	KLV-S40	131505
Kelvin Komfort kørestol S 48	34-40	48	55	60	130	55	KLV-S48	131508
Kelvin Komfort kørestol M 40	40-46	40	55	66	130	55	KLV-M40	131511
Kelvin Komfort kørestol M 48	40-46	48	55	66	130	55	KLV-M48	131514
Kelvin Komfort kørestol M 56	40-46	56	55	66	130	55	KLV-56	131517
Kelvin Komfort kørestol L 48	46-50	48	55	75	130	55	KLV-L48	131520
Kelvin Komfort kørestol L 56	46-50	56	55	75	130	55	KLV-L56	131523

Se det store tilbehørsprogram

Gå på makerehab.com
og download produktarket



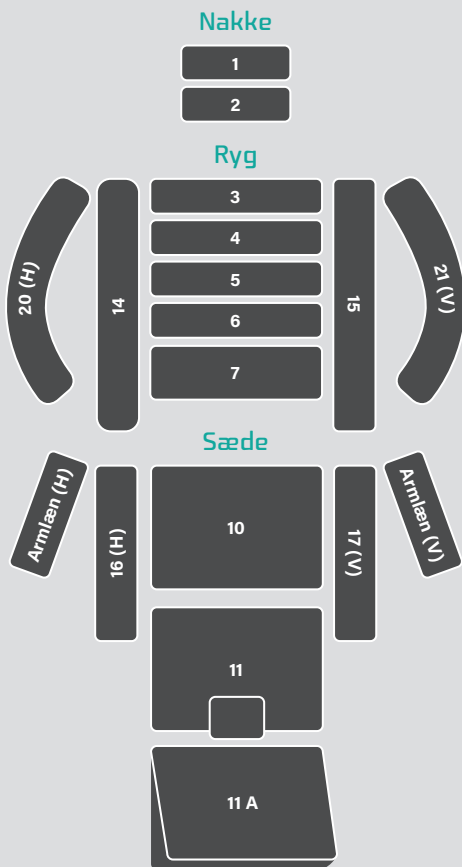

Pudeoversigt

- 1 Kelvin hovedstøtte
- 2 Ryglænsforlænger
- 3-8 Rygpuder
- 10 Flad sædepude
- 11 Sædepude med abduktionsklods
- 11 A Kileformet sædepude
- 12-13 Ben/underbenspuder
- 14-15 Sidepuder
- 16-17 Lår sidepuder
- 18-19 Underbens sidepuder
- 20-21 Flexarm understøtter
- 22 Fod-understøttelsespude
- 23-24 Hårde armlæn med puder
- 28-29 Lægstøtter, side
- 30-31 Lægpude, posterior
- 32-33 Fodpude



Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor

Den ultimative positioneringsløsning
– med hjælperstyret køremotor

Kelvin Aura kørestolen er opbygget ud fra samme principper som Kelvin Komfort kørestolen, men udmærker sig især til mennesker, som ofte er ude af huset eller færdes i terræn. Ligeledes en fordel, hvis personen er tung.

Det er desuden muligt at montere el-tilt med 45° tilt, svarende til tiltet på Kelvin Komfort kørestolen. Dette skal monteres af Make Rehabs tekniske afdeling.

Kelvin Aura systemet er interegeret i stolens baghjul, hvilket gør, at vendradiusen ikke øges, sammenlignet med en Kelvin Komfort kørestol uden motor. Desuden optimeres arbejdsmiljøet for plejepersonalet, som kører stolen.

Individuelt justérbare pudemoduler afhængigt af behovet for trykaflastning

Kelvin Aura kørestolen er en modulopbygget *tilt in space* kørestol, hvilket giver rig mulighed for at justere og tilpasse stolen. Kørestolen er opbygget af pudemoduler, og modulernes fyldning er en kombination af krøyerkugler og latex skum. Mængden af fyld i hvert modul justeres med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Er der behov for endnu mere trykaflastning kan fyldet udskiftes med NGP kugler. Herved understøttes og vedligeholdes den enkeltes siddestilling bedst muligt, og den enkeltes mulighed for at opretholde eller genvinde et meningsfyldt og aktivt liv øges.

Forskellige positioneringsbælter til forskellige funktionsniveau

Kelvin Aura kørestolen leveres nu med en ny fleksibel løsning til montering af forskellige positioneringsbælter; herved sikres et korrekt træk i positioneringsbæltet. Stolens store fleksibilitet gør det nemt at tilpasse og justere stolen i takt med, at den enkeltes funktionsniveau ændres.

Desuden har kørestolen et rigt tilbehørsprogram, hvor man kan vælge mellem tre forskellige sædeløsninger, tre typer nakkestøtter, to typer betræk, flexarme med og uden tyngde, bord, sidestøtter afhængigt af kropsform, armlæn osv. Herved sikres, at personen får fuldt udbytte af stolens funktioner.



Stor genanvendelighed samt mulighed for gentilpasninger

Kelvin Aura kørestolen har med sin fleksibilitet og rige udvalg af tilbehør en stor genanvendelighed. Make Rehab tilbyder vores kompetencer og service i forbindelse med udførelse af gentilpasning af nye og tidligere indkøbte kørestole.

Energibalance og øget livskvalitet

Kelvin Aura kørestolens komfort og unikke tilpasningssystem bidrager med at skabe et afgrænset og trygt miljø for den svækkede person med lavt funktionsniveau, som stadig kan opretholde et liv ude af huset. Herved skabes energibalance, hvor personen kan frigøre ressourcer og overskud til eksempelvis at øge eller vedligeholde deltagelse i sociale aktiviteter samt have overskud til at deltage aktivt i spisesituationen. Således kan personen opretholde et meningsfyldt liv, hvilket giver livskvalitet.



Hvem vil have gavn af en Kelvin Aura kørestol?

Mennesker som ikke er i stand til at sidde i en almindelig komfortstol, men stadig har et aktivt socialt liv uden for hjemmet. Personer i terminale forløb. "Tunge mennesker". Mennesker med smerter, med deformiteter, med risiko for tryksår, med motorisk uro, med respiratoriske udfordringer, med ufrivillige bevægelser, med SI-vanskeligheder og i forbindelse med tidlig mobilisering efter en apopleksi.

I forhold til diagnoser anvendes Kelvin Aura ofte til mennesker med demens i de sene stadier, mennesker med Parkinson, mennesker med ALS, mennesker med sklerose, mennesker med Huntington's disease og mennesker med forskellige typer pareser såsom hemiplegi.

>

Specifikationer

Produktspecifikationer	
Max vægtpacitet	125 kg
Vægt	Ca. 65 kg
Sædetilt bagud	0 - 45°
Nakkestøtte	Ja, flere typer
Fodstøtter	Ja, flere typer
El-tilt kan tilkøbes eller eftermonteres	Kontakt Make Rehab for service og pris
Indstillelige skubbehåndtag	Ja
Indstillelig i hofte-, knæ-, og ankelled	Ja
Åndbart- og vaskbart betræk	Ja
Stel	Lakeret aluminium
Hjul	Massive
Pudeoverflade	PU
Pudefyld	Latex med krøyerkugler. Alternativt NGP kugler.
Maksimal sikker hældning	7°
Maks hastighed	6 km/t.
Batteritype	Li-ion, 36 V
Batterikapacitet	11,6 Ah
Batteriets vægt	3 kg
Opladningstid	6 timer til maks. opladning
Rækkevidde	18 km*
Opladerindgang	100 – 240 V 50/60 Hz
Opladerudgang	24 V DC/2,35 A
Temperatur ved brug	-5 °C til +45 °C
Temperatur ved opladning	+10 °C til +40 °C
Temperatur ved opbevaring og transport	-10 °C til +60 °C**

* I praksis kan rækkevidden være kortere. Brugervægt, vejrforhold, underlagets hårdhed, hældninger samt batteriets alder kan alle påvirke rækkevidden.

** Temperaturen ved langtidsopbevaring af batteri skal holdes inde for 10-30°C.

Specifikationer

Model – mål i cm	Sædebredde	Sædedybde	Sædehøjde	Total bredde	Total længde	Ryglænsenhøjde	Varenr.	HMI nr.
Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor S 40	34-40	40	55	60	130	55	KLVA-S40	131524
Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor S 48	34-40	48	55	60	130	55	KLVA-S48	131527
Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor M 40	40-46	40	55	66	130	55	KLVA-M40	131530
Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor M 48	40-46	48	55	66	130	55	KLVA-M48	131533
Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor M 56	40-46	56	55	66	130	55	KLVA-M56	131536
Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor L 48	46-50	48	55	75	130	55	KLVA-L48	131539
Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor L 56	46-50	56	55	75	130	55	KLVA-L56	131542



Se det store
tilbehørsprogram

Gå på [makerehab.com](https://www.makerehab.com)
og download
produktarket



Kelvin Swing kørestol

Den stimulerende positioneringsløsning

Kelvin Swing kørestolen bygger på samme principper som de øvrige Kelvin kørestole, men her er det muligt at tilkoble en aktiv gyngefunktion

Selve gyng bevægelsen er både nem at udløse og justere og kan låses ved transport eller i forbindelse med aktiviteter, såsom spisning og forflytning. Ligeledes kan stolen justeres i højden, hvilket gør det muligt for den selvhjulpne at forflytte sig ind og ud af stolen.

Kelvin Swing kørestolen fås i tre størrelser og med tre typer nakkestøtter. Derudover kan flexarme med eller uden tyngde monteres, med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Hvem vil have gavn af en Kelvin Swing kørestol?

Stolens gyngefunktion er især tiltænkt mennesker med lavt eller højt arousal niveau, men har også en gavnlig effekt på det respiratoriske system.

I forhold til diagnoser anvendes Kelvin Swing kørestolen ofte til mennesker med demens i de sene stadier, mennesker med motorisk uro, mennesker med KOL i de sene stadier og mennesker i palliative forløb, hvor gyng bevægelsen kan give ro og lindring.

Mennesker med nedsat lungefunktion og tendens til øget sekret kan have god effekt af denne funktion. Ligeledes kan stolen benyttes i forbindelse med tidlig mobilisering på intensiv afsnit, neurologisk afsnit og rehabiliteringsafsnit.



Specifikationer

Produktspecifikationer	
Max vægtpacitet	125 kg
Vægt	39 kg
Sædetilt bagud	Nej
Nakkestøtte	Ja, flere typer
Fodstøtter	Ja, flere typer
Hjælpe motor kan eftermonteres	Nej
Indstillelig skubbebøjle	Nej
Indstillelig i knæ- og ankelled	Ja
Åndbart- og vaskbart betræk	Ja
Stel	Lakeret aluminium
Hjul	Massive
Pude overflade	PU

Model – mål i cm	Sæde- bredde	Sæde- dybde	Sæde- højde	Total bredde	Total længde	Ryglæns- højde	Varenr	HMI nr.
Kelvin Swing kørestol S 48	34-40	48	41-47	70	100	60	KLVS-S48	131545
Kelvin Swing kørestol M 48	40-46	48	41-47	70	100	60	KLVS-M48	131549
Kelvin Swing kørestol L 48	46-52	48	41-47	70	100	60	KLVS-L48	131552



Scan QR koden og se gyngefunktionen på Kelvin Swing kørestolen



Se det store tilbehørsprogram
Gå på [makerehab.com](https://www.makerehab.com) og download produktarket

Kelvin Cumulix kørestol

Den enkle positioneringsløsning, velegnet til mange typer mennesker med behov for en komfortstol

Kelvin Cumulix kørestolen er en basis udgave af Kelvin Komfort kørestolen, hvor personen ikke har brug for de mange individuelle tilpasningsmuligheder. Kelvin Cumulix er en god og enkel *tilt in space* komfortstol, som er fleksibel, let og brugervenlig og dækker en bred målgruppe.

Med Kelvin Cumulix kørestolen tilbyder vi en mindre og lettere komfortstol, som er enkel at bruge og nemt kan tilpasses i takt med, at den enkeltes funktionsniveau ændres.

Fås i tre størrelse med forskellige benstøtter

Kelvin Cumulix er opbygget ud fra samme koncept som Kelvin Komfort kørestolen, og findes i tre størrelser.

Pudemodulerne i ryg- og sædesystemet er fyldt med krøyerkugler og latex skum.

Kørestolen kan opsættes med forskellige typer benstøtter bl.a. med swing away benstøtter, hvilket gør det muligt for personen selv at forflytte sig ind og ud af stolen. Derudover kan stolen monteres med et antibakterielt og åndbart betræk.

Hurtig genanvendelse

Kelvin Cumulix kørestolens muligheder og enkle indstillinger gør det hurtigt og nemt at genanvende stolen.

Ligeledes giver kørestolen den enkelte mulighed for at genetablere eller opretholde kontakten til, og at være en del af omverdenen - selv i de svære og kritiske livsfaser.

Hvem vil have gavn af en Kelvin Cumulix kørestol?

Kelvin Cumulix kørestolen egner sig til en bred målgruppe, som har behov for en enkelt komfortstol, hvor den aktive kørestol ikke er tilstrækkelig. Ligeledes er kørestolen velegnet til brug i tidsbegrænsede perioder, eksempelvis på hospicer og ved palliative forløb, på medicinske afsnit, samt på apopleksi afsnit og intensiv afsnit - begge steder i forhold til tidlig mobilisering.



Specifikationer

Produktspecifikationer	
Max vægtpacitet	125 kg
Vægt	Ca. 39 kg
Sædetilt bagud	10 - 40°
Nakkestøtte	Ja, flere typer
Fodstøtter	Ja, flere typer
Hjælpe motor kan eftermonteres	Ja
Indstillelig skubbebøjle	Nej
Indstillelig i hofte-, knæ-, og ankelled	Ja
Åndbart- og vaskbart betræk	Ja
Stel	Lakeret aluminium
Hjul	Massive
Pude overflade	PU

Model – mål i cm	Sædebredde	Sædedybde	Sædehøjde	Total bredde	Total længde	Ryglænsenhøjde	Varenr	HMI nr.
Kelvin Cumulix kørestol S 48	34-40	48	60	70	130	60	KLVC-S48	119651
Kelvin Cumulix kørestol M 48	40-46	48	60	70	130	60	KLVC-M48	119652
Kelvin Cumulix kørestol L 48	46-52	48	60	70	130	60	KLVC-L48	119653

Se det store tilbehørsprogram

Gå på make rehab.com
og download produktarket



Bendix ryg

Det fleksible rygssystem med mange tilpasningsmuligheder og stor genanvendelighed, som kan påsættes de fleste kørestole

Bendix rygssystemet er med sin modulopbygning og universale monteringskit en unik og fleksibel løsning til mennesker, som har behov for ekstra komfort og siddestøtte - i en hvilken som helst kørestol. Grunden er, at rygssystemet kan monteres på stort set alle typer kørestole.

Individuelt justérbare pudemoduler – samme princip som Kelvin kørestolene

Modulenheden er opbygget med ekstra dyb siddestøtte, hvilket giver yderligere stabilitet samt mulighed for at lave en trepunktstøtte. Hver af de fem rygmoduler samt de to sidepuder, som er opdelt i tre kamre, kan individuelt tilpasses med fyld efter samme principper som de øvrige Kelvin kørestole. Så fejlstillinger såsom kyfoser og skolioser får den tilstrækkelige plads og støtte, tilpasset den enkeltes behov, hvilket sikrer en total aflastning af udsatte områder.

Stor genanvendelighed – Make Rehab tilbyder montering og tilpasning

Rygssystemets fleksibilitet gør det muligt, at Bendix ryggen kan følge med den enkelte ved udskiftning til en anden kørestol eller nemt kan genanvendes til en anden person.

Bendix ryggen fås i 4 størrelser. Det er muligt at påsætte flexarme med og uden tyngde på den pågældende kørestol samt alle nakkestøtter. Ryggen leveres med et stretch betræk.

Make Rehabs konsulenter står gerne til rådighed og er behjælpelige med montering og tilpasning af rygssystemet, samt vejledning i valg af størrelse.

Hvem vil have gavn af en Bendix ryg?

Mennesker med svære smerteproblematikker og eller låste fejlstillinger, som der ved ikke kan opretholde en siddestilling. Mennesker med senfølger efter apopleksi, mennesker med sammenfald på grund af osteoporose, mennesker med ALS, som anvender el-stol. Derudover kan mennesker med sklerose, demens og Parkinson have gavn af en Bendix ryg.

Se flere billeder af ryggen på [makerehab.com](https://www.makerehab.com) og download produktarket



Specifikationer

Produktspecifikationer	
Flexarme	Ja
Nakkestøtte	Ja, flere typer
Åndbart- og vaskbart betræk	Ja
Pude overflade	PU
Pudefyld	Latex med krøyerkugler

Model - mål i cm	Rygbrædde indvendig	Passer til sædebrædde	Varenr	HMI nr.
Bendix ryg str. 0	30	37	BDXR-37	74648
Bendix ryg str. 1	35	42	BDXR-42	74649
Bendix ryg str. 2	40	47	BDXR-47	74650
Bendix ryg str. 3	45	52	BDXR-52	74651

Tilbehør	Varenr
Betræk til Bendix ryg str. XS	BDXRB-37
Betræk til Bendix ryg str. S	BDXRB-42
Betræk til Bendix ryg str. M	BDXRB-47
Betræk til Bendix ryg str. L	BDXRB-52
Monteringsbeslag	BDXRB-55
Lændestøttepude kile formet	KLVR-180
Sidestøttepude S	KLVR-181
Sidestøttepude M	KLVR-182
Kropstøttepude 3 cm	KLVR-183



Foldbar bariatrisk kørestol

Foldbar bariatrisk kørestol er specielt designet til mennesker med bariatri, som har gangbesvær eller problemer med at gå, idet kørestolen giver mennesket mobilitet og mulighed for at opretholde et aktivt liv.

Den foldes let sammen og placeres nemt i et bagagerum på en almindelig størrelse bil.

Kørestolen kan bruges indendørs og udendørs på en flad, solid overflade og er også velegnet til transport takket være dens foldemekanisme.

Kørestolen kan enten drives frem af personen eller af en ledsager og er designet til en max vægtpacitet på 250 kg. Kørestolen kan forstærkes yderligere op til 350 kg, afhængigt af brugen.

Foldbar bariatrisk kørestol er designet til at tilgodese ergonomiske behov hos mennesker med bariatri. Armlænene sikrer en ergonomisk optimeret siddeposition og øger siddekomforten. Armlænene kan spejlvendes for abduktion og adduktion. Afhængigt af armlænenes placering kan kørestolen "vokse" 3 cm i bredden i begge sider. Stolen er ligeledes let at justere i højden.

Stel, sæderamme og sidedele er lavet af aluminium. Ryglænet er polstret og justérbart, armlænene er indstillelige og lavet af PU-skum. Kørestolen har parkeringsbremse og leveres med benstøtter med vinkelindstillelig fodplade.

Kørestolen kan nemt rengøres og desinficeres. Kørestolens rammedele kan tørres af med en fugtig klud. Ved kraftig tilsmudsning anvendes et mildt rengøringsmiddel. Stellet, sædet, armlæn og ryglæn desinficeres med en ren klud, og kørestolspuden skiftes ved overgang til ny person.

Foldbar bariatrisk kørestol er anvendelig i plejesektoren, på plejehjem, hospitaler, rehabiliteringscentre, daghjem, ambulatorier og i private husstande.

Tilbehør

- Amputationsstøtte, højre og venstre
- Elevérbar benstøtte med knæ-polstring, højre og venstre
- Nakkestøtte
- Skivebremse (ledsager)
- Stokkeholder
- Transportbeslag
- Bariatrisk kørestolspude i 4 størrelser





Specifikationer

Produktspecifikationer	
Max vægtkapacitet	250 - 350 kg
Længde foldet sammen uden benstøtter	79 - 84 cm
Bredde foldet sammen	33 cm
Højde foldet sammen	103 cm
Højde i alt	103 cm
Samlet længde med benstøtter	104 - 109 cm
Vægt i alt	28 - 30 kg
Vægten på den tungeste enkeltkomponent	16,21 - 17,73 kg
Statisk stabilitet ned ad bakke	0 - >20° (til SB 750, lang sidedel)
Statisk stabilitet op ad bakke	0 - 15° (for SB 750, lang sidedel)
Statisk stabilitet sidelæns	0 - >20° (til SB 750, lang sidedel)
Max hældningsvinkel, hvor parkeringsbremses kan bruges	15°
Sædevinkel	0 - 3°
Effektiv sædedybde (justerbar)	36/43 - 39/48 cm
Sædebredde bagtil (justerbar)	0/+20 - 0/-70 cm
Sædehøjde foran	39 - 47 cm
Ryglæn vinkel	7,5° med lumbalknæk
Afstand fra fodplade til sædeflade	39 - 46 cm
Vinkel på benstøtte til sædeflade	118
Armlæns højde (tilbehør justerbar)	30 - 32 cm
Ryglæn til forreste kant på armlæn	31,5 - 33,1 cm
Drivringens diameter	48,7 cm
Akselens vandrette placering	+10 - +50 cm
Min. drejeradius	89 (til SB 750, lang sidedel)
Styreområde	127 - 143 cm



Specifikationer

Model – mål i cm	Sædebredde	Sæde dybde	Sædehøjde	Total bredde	Total længde	Ryglænsenhøjde	Varenr.	HMI nr.
Foldbar bariatrisk kørestol 60	60	36 - 48	12	79	109	60	FBK60	129562
Foldbar bariatrisk kørestol 65	65	36 - 48	12	84	109	60	FBK65	129600
Foldbar bariatrisk kørestol 70	70	36 - 48	12	89	109	60	FBK70	129603
Foldbar bariatrisk kørestol 75	75	36 - 48	12	94	109	60	FBK75	129606
Bariatrisk kørestolspude 60	60	48	12				BKP60	130515
Bariatrisk kørestolspude 65	65	48	12				BKP65	130518
Bariatrisk kørestolspude 70	70	48	12				BKP70	130521
Bariatrisk kørestolspude 75	75	48	12				BKP75	130524



Tilbehør	Varenr.
Amputationsstøtte højre	FBK01
Amputationsstøtte venstre	FBK02
Elevérbar benstøtte med knæpolstring højre	FBK03
Elevérbar benstøtte med knæpolstring venstre	FBK04
Nakkestøtte	FBK05
Skivebremse (ledsager)	FBK06
Transportbeslag	FBK07

Foldbar bariatrisk kørestol med elevérbar benstøtter med knæpolstring

Produkttest

DIN EN 12183

Standarderne for manuel kørestol er blevet testet

ISO 7176-8

Den statiske belastningskapacitet, stødmodstand og udmattelsesstyrke er blevet testet

I 1021-2

Resistens over for antændelse af polstring og plastkomponenter er blevet testet

ISO 10993-5

Testet for giftighed i materialet

Bariatrisk elkørestol Forest

Make Rehabs bariatriske elkørestol Forest er en specialdesignet elektrisk kørestol med fokus på komfort, funktionalitet og frihed. Elkørestolens konstruktion er tilpasset målgruppen med et bredere designet sædesystem og rygsystem end traditionelle kørestole for at give en mere behagelig siddeoplevelse. Materialerne og farverne er nøje udvalgt for at afspejle stolens høje kvalitet, finish og brugbarhed.

Forest elkørestolen er udstyret med alle de nødvendige el justeringsmuligheder, herunder total kip, rygfæld og sædekipp, og elektrisk elevation af benstøtterne, som kan indstilles til den enkeltes optimale siddeposition og aflaste kroppen over længere tid. Benstøtterne kan sideforskydes op til 4,5 cm i hver side, og fodpladen er let at justere til den enkeltes fodstilling. Lægpladernes placering er også enkle at justere og tilpasses til den enkeltes behov.

Forest elkørestol giver også mulighed for at justere armlænene og fodpladen efter personlig præference, så man kan sidde i en neutral stilling. Ryggens udformning og indstillingsmuligheder sikrer optimal støtte uafhængigt af kropsformen. Elkørestolen kan således optimeres tilpasset individuelle behov.

Forest elkørestolen er let og sporty, og samtidig stabil og sikker ved udendørs kørsel. Den har en imponerende 9% stigningsevne og kan klare op til 10 cm dybdeforskelle, hvilket sikrer maksimal kontakt med underlaget og fantastiske køreegenskaber og manøvrabilitet.

Den er designet med fokus på mennesker, som lever med svær overvægt/bariatri, og den er tilgængelig i forskellige bredder og dybdejusterbarhed fra ca. 40 til 55 cm. Derfor kan man finde en stol, der passer perfekt til individuelle behov.

Endelig er stolen nem at bruge med dens overskuelige joystick og smidige affjedring, der giver en ubesværet køreglæde og bevægelse med hastigheder op til 10 km/t. Transportbeslaget gør det også let at tage stolen med på farten, hvilket giver større frihed til at forblive selvhjulpne og uafhængige.



Specifikationer

Produktspecifikationer	
Max vægtkapacitet	250 kg
Sædebredde	50-55-60-65-70 cm
Total bredde	+ 16 cm af sæde bredde
Sædehøjde	45 cm
Sædedybde	fra ca. 40 til 55 cm
Total højde	110 cm
Total bredde	115 cm ved benstøtter i 2°
Vægt	137 kg
Vinkelbare armlæn	11 - 26°
Horisontal forskydning af armlæn	Ja
Højde justerbare armlæn	Ja
Sædetilt	2 - 32°
Rygtilt	95 - 120°
Safe slope	9%
Styring system	V-STAB
Motor	2x 350 W
Batterier	2x 12v 80 Ah
Stolen leveres med transport beslag	Ja

Model – mål i cm	Sædebredde	Sædedybde	Sædehøjde	Total bredde	Total højde	Varenr	HMI nr.
Bariatrisk elkørestol Forest 50	50	40 - 55	45	115	110	BEK50	135639
Bariatrisk elkørestol Forest 55	55	40 - 55	45	115	110	BEK55	135642
Bariatrisk elkørestol Forest 60	60	40 - 55	45	115	110	BEK60	135645
Bariatrisk elkørestol Forest 65	65	40 - 55	45	115	110	BEK65	135648
Bariatrisk elkørestol Forest 70	70	40 - 55	45	115	110	BEK70	135651

Se flere billeder af stolens positioner
 på makerehab.com
 og download produktarket

Komfort Zone Stolen

Forestil dig at være sengeliggende eller at skulle sidde over længere tid i en kørestol uden optimal komfort. Det kan være udfordrende især for mennesker med uro, kroniske smerter og ufrivillige bevægelser at opnå en behagelig siddestilling. Men nu er der en løsning tilgængelig - MakeRehab Komfort Zone stolen.

MakeRehab Komfort Zone stolen er velegnet til en lang række plejemiljøer og private hjem. Med Lateral Support-rygpuderne kan du opretholde en god midterlinjes siddeposition, selv med ukonventionelle kropsformer såsom skoliose, kyfose, lordose og kontrakturer. Tilt-in-space, rygfæld og justering af den integrerede benstøtte hjælper med at fordele kropsvægten naturligt og giver øget komfort, støtte og trykaflastning på alle udsatte steder. Tilt-in-space i kombination med eleverbar fodstøtter er med til at optimere og variere stillingsskift og trykaflastning i løbet af dagen.

Den er ideel til voksne med komplekse siddestillinger, smerter, forstyrret SI-apparat og ufrivillige bevægelser, hvor der kræves komfort og en medium til høj grad af postural støtte for at opretholde en sidende stilling i længere tid. Make-Rehab Komfort Zone stolen kan nemt tilpasses til den optimale siddeposition med dens justerbare sædebredde og -dybde, justerbare sædehøjde og aftagelige armlæn. Vi hjælper gerne med tilpasning af stolen og kan bidrage med 24 timers positioneringsanalyse.

Kombinationen af 100 mm retningsbestemte låsehjul og et ergonomisk placeret skubbehåndtag, betyder at den lette og robuste stol kan nemt og sikkert flyttes rundt i ethvert plejemiljø eller hjem hvor den vil gavne personer med komplekse siddestillinger og behov for postural støtte og trykaflastning.



Specifikationer

Produktspecifikationer	
Sædehøjde fra gulv	46 – 61 cm
Sædebredde	33 – 50 cm
Sædedybde	46 – 56 cm
Ryglænsøjde	75 – 90 cm
Armlænsøjde	7,5 – 27 cm
Totalbredde	66 cm
Tilt-in-Space	37 degrees from -5° to +32°
Ryg tilt	40° Recline
Fodelevation	40° Elevation

Model – mål i cm	Varenr	HMI nr.
Komfort Zone hvilestol Elektrisk	KMFZE-01	136142
Komfort Zone hvilestol Manuel	KMFZM-01	136143

Tilbehør	Varenr
Komfort lægsupportpude	NTGZ01
Komfort nakkestøtpeude	NTGZ02
Betræk	NTGZ03
Flex arm	NTG12

- Justerbar armhøjde
- Aftagelige arme
- Uafhængig ryglæn
- Flip-up fodplade
- Pressure Care som standard
- Lateral vandfald rygstøtpeude
- 100 mm retningsbestemt låsehjul
- Ergonomisk placeret skubbehåndtag

- Pleje- og plejehjem
- Hospitaler
- Hospice
- Hjemlige hjemmemiljøer



Se flere billeder af stolens positioner på makerehab.com og download produktarket



Make Rehab A/S

info@makerehab.dk
makerehab.com

Hovedkontor
+45 91 912 912

Sjælland & øerne
+45 91 917 917

Jylland & Fyn
+45 91 919 919